

Les patients sont férus d'innovation et d'efficacité  
Ils font confiance à ThermoTK.



Le chariot move et la  
tablette sont des options.

### Spécifications techniques

Tension électrique	100–240 V~/ 50/60 Hz
Fusibles	2x T2A, 250 V
Consommation	160 VA
Puissance	120 W effective (350 Wpeak) à 100 $\Omega$
Fréquence	460 kHz (Mode capacitif) 540 kHz (Mode résistif)
Précision	$\pm$ 20%
Indice de protection	I
Catégorie d'utilisation	BF
Modes	capacitif et résistif
Dimensions L / P / H	32 cm / 24 cm / 13 cm
Poids	3,4 kg sans accessoires

**Les accessoires et la mallette de transport sont inclus.**



Pièce à main



3 Applicateurs



Electrode

Distribution:

Zimmer MedizinSysteme GmbH  
Junkersstraße 9  
89231 Neu-Ulm  
Tel. +49 7 31. 97 61-291  
Fax +49 7 31. 97 61-299  
export@zimmer.de  
www.zimmer.de

**Zimmer**  
MedizinSysteme



Thermo **TK**

# Thermo *TK*

## Indispensable à la physiothérapie moderne



### **Le principe**

Un courant électrique de haute fréquence à peine perceptible pour le patient est appliqué lors de l'utilisation du ThermoTK.

Le courant de haute fréquence pénètre dans la peau et s'y transforme en chaleur.

Contrairement au courant continu ou aux impulsions de basse fréquence, les hautes fréquences pénètrent les couches superficielles de la peau sans perte d'énergie.

Grâce à cette propriété, l'énergie n'est libérée que dans les tissus plus profonds, où elle est transformée en chaleur.

# Chaleur profonde grâce à l'électrothérapie de haute fréquence



## Usage médical

- Antalgie
- Hyperémie
- Détonification musculaire

## Recommandations / Usages


Physiothérapie classique, rééducation, gériatrie et sport de haut niveau. Thermo 7K est recommandé pour le traitement des douleurs aiguës et chroniques de la musculature et du squelette.



## Thermo 7K

### Plaisir et convivialité lors du traitement

- Commandes tactiles
- Grand écran en couleurs
- Programme intuitif pour une manipulation minimale
- Sélection du traitement d'après le symptôme détaillé
- Informations pour les utilisateurs professionnels

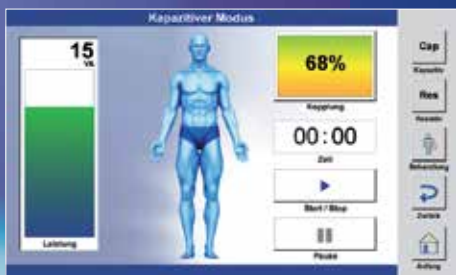

### 2 modes – la thérapie à portée du doigt !

- Mode capacitif pour les structures superficielles, p. ex. les muscles
- Mode résistif pour le traitement de structures plus profondes telles que les tendons, ligaments et épiphyses
- Sélection tactile du mode simple et rapide
- Aucun changement fastidieux des électrodes



### Du point de vue du patient

Les patients sont convaincus dès la première séance par son action immédiate et bienfaisante.

### Thermo 7K – indispensable à votre thérapie

Combinaison unique de l'efficacité d'une thérapie active, de l'effet hyperémique et antalgique du courant électrique, et du bien-être d'un massage.

### Thermo 7K et vous – un duo thérapeutique de choc

La chaleur profonde s'associe au traitement manuel pour vous offrir d'extraordinaires possibilités thérapeutiques. Élargissez votre éventail de services et traitez vos patients encore plus efficacement.

### Thermo 7K – toujours présent

Le système entier se prête idéalement à un usage ambulatoire en médecine sportive.